

電脈衝美顏機

使用說明書

產品規格

產品名稱：電脈衝珍珠美顏機

產品型號：TKD-TF101

電 源：4號電池 / 3顆

電 壓：4.5V

本體體積：W98 x D48 x H21(mm)

本體重量：65g(不含電池)

產地：台灣

製造商：康健欣生化科技有限公司

網址：WWW.BIO-KJX.COM

信箱：service@bio-kjx.com

地址：台灣新北市新北產業園區五權七路52號4樓



康健欣生化科技有限公司
KANG JIAN XING INTERNATIONAL CO.,LTD

TEL +886-2-2298-9358

<http://www.bio-kjx.com>



目錄


1. 產品外觀與配件
2. 使用方式
3. 使用後事項
4. 注意事項

使用前請詳閱本說明書
請保存說明書以供日後使用參考



各部件名稱與配件

1. 背蓋
2. 化妝棉固定扣環
3. 電脈衝TOUCH線

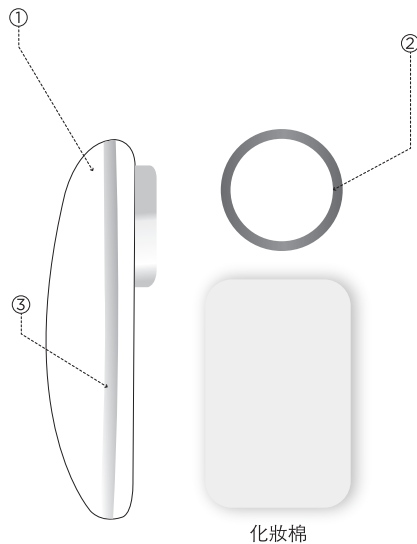




各部件名稱與配件

1. 電脈衝導入導出探頭
2. LED抑菌藍光
3. LEVEL選擇鈕
4. MODE鈕(POEWR/SELECT)
5. Ion深層導入
6. Cle深層清潔



各部件名稱與配件

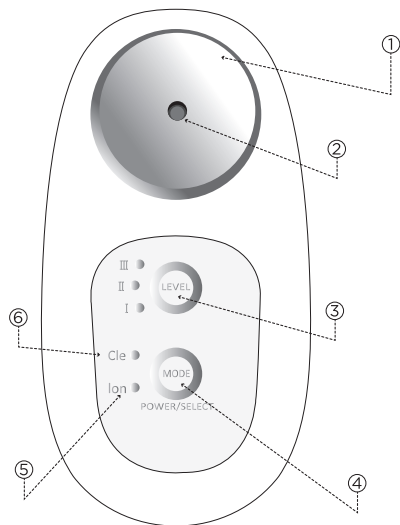



使用方法

1 MODE鈕(POWER/SELECT)


按第一下“MODE”  按鈕開啟電源並進入Ion深層導入模式並開啟抑菌藍光

按第二下“MODE”進入Cle深層清潔模式(此模式不會開啟抑菌藍光)

按第三下關閉電源。

2 Level 強度選擇鈕

共三段強度調整，每按一次“LEVEL”  選擇按鈕可切換強度段數。

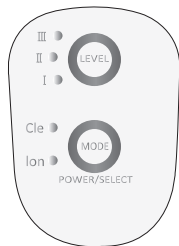

LEVEL I.  按
↓
LEVEL II.  按
↓
LEVEL III.  按
↓
LEVEL I.


↓  按
Ion深層導入模式
↓  按
Cle深層清潔模式



使用方法

1 打開背蓋，置入電池。


※請注意安裝電池的方向性

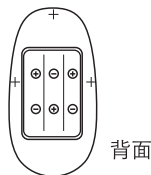

背面


2 手握方法:

請如圖所示手握主機，請接觸到電脈衝TOUCH線

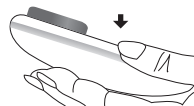

3 化妝棉固定方法:

- 1 將化妝棉放置於探頭上
- 2 再將化妝棉固定扣環扣上探頭

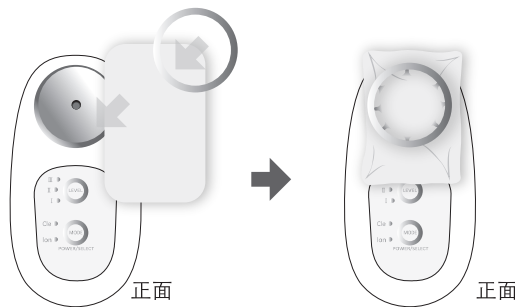

正面

正面



使用方法

1 按下" MODE"按鈕開啟電源

2 按下" MODE"按鈕選擇使用模式

選擇導入Ion-進入深層導入模式

選擇導出Cle-進入深層清潔模式

3 按下" LEVEL"按鈕選擇使用強弱度

※開始時請先使用LEVEL 1。

※請按個人需要選擇適合的段度。

4 開始進行使用

※導入Ion模式可搭配化妝水、面膜、精華液、乳液使用。

※導出Cle模式可搭配化妝棉沾濕化妝水使用。

5 使用完畢後, 按下" MODE" 按鈕關閉電源



使用後事項

清潔方法

每次使用後均應清理主機，平時應維持本產品的清潔。

1 確保電源已關閉。

2 以乾布或微濕毛巾將探頭與機身上的髒汙擦拭乾淨。

• 請勿使用除汗劑、稀釋劑、汽油、指甲油卸除劑等清潔。

※注意:不可用水沖洗或浸泡在水中

存放方法

• 每次使用完畢清潔完後，請妥善保管。

• 請勿放置於火源附近、陽光曝曬下或浴室等潮濕地方。

• 請把本機放置在於兒童無法觸及的地方。



注意事項

※本產品不宜使用在皮膚發生異常狀況，例如有傷口、潰爛、發炎..等。

請勿擅自拆解本產品避免發生危險。

切勿摔落或撞擊本產品避免引起故障。

清理本產品時請勿直接用水沖洗或使用含有機溶劑的清潔劑避免造成本產品故障。

請勿在高溫、潮濕、陽光直射之場所使用或放置本產品，避免發生故障及危險。

若儀器發生故障應洽原購買店家詢問請勿自行維修。



注意事項

本機操作發生異常時，可先參照「排除故障」部分進行檢查，如仍無法解決，請向當地代理商諮詢。

排除故障	
狀況	可能原因/解決方法
無法啟動	請更換新電池 檢查電池是否裝反